

Soventol®

Wund- und Heilgel

Zur Behandlung akuter und chronischer Wunden

Zweckbestimmung

Soventol® Wund- und Heilgel ist ein Lipogel zur äußerlichen Behandlung von akuten Wunden (z. B. Schürf-, Schnitt-, Kratz- und Bisswunden* sowie Platz- und Risswunden) und Verbrennungen 1. und 2. Grades (Blasenbildung) sowie Sonnenbrand.

Soventol® Wund- und Heilgel kann auch bei gereinigten, mäßig nässenden, nicht infizierten chronischen Wunden (Dekubitus 2. Grades) – hier nur unter Aufsicht von medizinischem Fachpersonal – verwendet werden.

*Bei Bisswunden muss für die Erstbehandlung unbedingt ein Arzt aufgesucht werden aufgrund der hohen Infektionsgefahr.

Eigenschaften

Soventol® Wund- und Heilgel ist ein weißes geruchloses Lipogel mit hydroaktiven Eigenschaften, das die befeuchtenden Eigenschaften eines Gels mit den pflegenden Eigenschaften einer Creme kombiniert. Es eignet sich sowohl zur Anwendung bei trockenen als auch bei mäßig nässenden Wunden. Soventol® Wund- und Heilgel setzt die Prinzipien der feuchten Wundheilung in mehrfacher Hinsicht für die optimale Heilung der verletzten Haut um. Der niedrige pH-Wert, der durch die Anwesenheit von Zink- und Eisenionen unterstützt wird, aktiviert den natürlichen Heilungsprozess bei Wunden, leitet die Gewebeneubildung ein und unterdrückt das Wachstum von Bakterien. Natürliche pflegende Öle und Vitamin E unterstützen die Regeneration der geschädigten Haut. Soventol® Wund- und Heilgel ist sehr gut verträglich und kann daher für die ganze Familie, auch bei Kindern und auf sensibler Haut, eingesetzt werden.

Soventol® Wund- und Heilgel schafft durch die physikalischen Eigenschaften der Creme folgende Voraussetzungen für eine schnelle Wundheilung:

- Rasche Schmerzlinderung und Kühlung
- Wiederherstellung eines geeigneten Mikroklimas in der Wunde
- Fördert die Wundheilung
- Reduziert die Schwellung
- Verringert die Infektionsgefahr
- Verringert die Narbenbildung


Hinweise zur Anwendung

Waschen Sie sich vor und nach der Behandlung einer Wunde die Hände. Vor Behandlung mit Soventol® Wund- und Heilgel sollte die Wunde sorgfältig gereinigt werden. Tragen Sie eine etwa 2 mm dicke Schicht Soventol® Wund- und Heilgel auf die gereinigte Wunde und über die Wundränder hinaus auf (die Wunde heilt von außen nach innen ab). In den ersten Tagen der Verletzung kann Soventol® Wund- und Heilgel mehrmals täglich angewendet werden.


Die Anwendung kann in jeder Phase der Wundheilung erfolgen bis zur vollständigen Abheilung. Achten Sie auf eine hygienische Entnahme des Inhalts, so dass die Tubenöffnung nicht mit der Wunde in Kontakt kommt. Es empfiehlt sich Soventol® Wund- und Heilgel in Verbindung mit einem handelsüblichen Pflaster oder Verbandstoff anzuwenden, dadurch wird die Wunde zusätzlich geschützt.

Mäßig nässende, nicht infizierte chronische Wunden (Dekubitus 2. Grades): Die Anwendung sollte nur unter medizinischer Aufsicht erfolgen.


Soventol® Wund- und Heilgel enthält keine hautreizenden Substanzen und kann im Schleimhautbereich (z.B. Nase) bzw. am Mund angewendet werden.

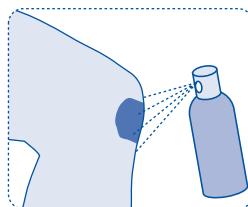


Säubern

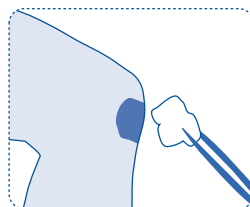

Trocknen

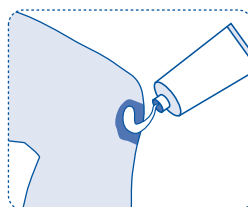

Auftragen

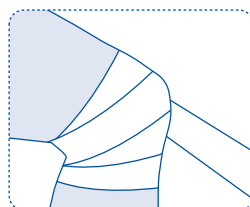

Abdecken

Vorsichtsmaßnahmen

- Soventol® Wund- und Heilgel ist nur für die äußerliche Anwendung bestimmt und darf nicht eingenommen werden.
- Nicht anzuwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe. Bei Auftreten einer allergischen Reaktion (Hautausschlag) sollten Sie das Lipogel nicht mehr anwenden. Waschen Sie dann bitte das Lipogel sorgfältig mit Wasser ab und wenden Sie sich an einen Arzt.
- Soventol® Wund- und Heilgel nicht auf den Augenlidern oder in den Augen anwenden. Falls Soventol® Wund- und Heilgel mit den Augen in Kontakt kommt, sollten Sie die Augen mit fließendem Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen.
- Soventol® Wund- und Heilgel nicht mit silberhaltigen Produkten oder okklusiven Verbandsmitteln kombinieren.
- Bei sehr großen, stark nässenden oder infizierten Wunden sollten Sie vor der Anwendung von Soventol® Wund- und Heilgel einen Arzt aufsuchen, da unter Umständen eine zusätzliche Behandlung erforderlich ist.
- Falls die Wunde sich rötet, schmerzt oder anschwillt oder falls die Wundheilung im Laufe einiger Tage nicht einsetzt, sollten Sie einen Arzt aufsuchen.
- Soventol® Wund- und Heilgel kann die Reißfestigkeit von Kondomen beeinflussen.
- Sie sollten Soventol® Wund- und Heilgel nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt anwenden, falls Sie schwanger sind oder stillen.

Nebenwirkungen

Es sind keine Nebenwirkungen bekannt. Wenn Sie dennoch Nebenwirkungen bei sich beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Apotheker oder dem Hersteller mit.

Hinweis zur Aufbewahrung

- Vor Frost und Hitze schützen! Lagern Sie das Lipogel an einem trockenen Ort und in der Original-Verpackung nicht unter 5 °C und nicht über 30 °C.

- Schließen Sie die Tube nach der Anwendung. Verwenden Sie hierfür bitte nur den Originaldeckel.
- Verwenden Sie Soventol® Wund- und Heilgel nicht mehr nach Ablauf des auf der Packung angegebenen Verfallsdatums.
- Aufbrauchfrist: 90 Tage nach Anbruch der Tube.
- Verwenden Sie bitte keine beschädigten Tuben. Auf unbeschädigte Versiegelung achten.
- Soventol® Wund- und Heilgel soll außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden!

Bestandteile

Trace Element Solution (Aqua dest, Zinc, Iron), Octyldodecanol, Hydrogenated Palm Glycerides, PEG – 200 Hydrogenated Glyceryl Palmitate, Cetyl Alcohol, Hydroxypropyl Starch Phosphate, Tocopherol, Polihexanide, Silica

Packungsgrößen

Tuben zu 5 g, 10 g, 20 g und 50 g. Möglicherweise werden nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

Stand der Information: Februar 2012

Erläuterung der Symbole auf dem Umkarton



Gebrauchsanweisung beachten



Verwendbar bis



Chargenbezeichnung



Medizinprodukt



Beschädigte Tube nicht verwenden



Minimale/Maximale Lagerungstemperatur



Hersteller

Hersteller:

MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG
Kuhloweg 37 · D-58638 Iserlohn

Telefon: +49 (0) 2371 937-0

Telefax: +49 (0) 2371 937-106

E-Mail: info@medice.de

www.medice.de



Medizinprodukt